

Saljol Rollator LED-Licht

für Saljol Carbon Rollator und Allround Rollator

DE

Bedienungsanleitung

Hersteller: Saljol GmbH
Frauenstraße 32
D-82216 Maisach
Phone: +49 (0)8141 317740
Fax: +49 (0)8141 3177411
Mail: hallo@saljol.de
Web: www.saljol.de

Lieferumfang
1x LED-Licht
3x AAA-Batterie



Produktübersicht
1 LED-Licht
2 Batterieabdeckung
3 AAA-Batterien
4 Batteriefach
5 Karabinerhaken
6 Magnet
7 Ein-/Ausschalter


Artikelnummer: 4058789013090

Inbetriebnahme

Entfernen Sie die Batterieabdeckung (2) auf der Rückseite des LED-Lichts vorsichtig in Richtung des Pfeiles. Legen Sie drei AAA-Batterien (3) in das Batteriefach (4) ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie die Batterieabdeckung (2) wieder und achten Sie darauf, dass sie sicher und fest sitzt. Das LED-Licht kann mithilfe des Karabinerhakens (5) an den Laschen der Saljol Rollatoraschen an der Vorder- oder Rückseite befestigt werden.

Mit dem Ein-/Ausschalter (7) können Sie das LED-Licht an- und ausschalten.

Informationen entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Fotos können von der Realität abweichen. ©2023 Saljol GmbH: alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Firma Saljol GmbH gestattet.

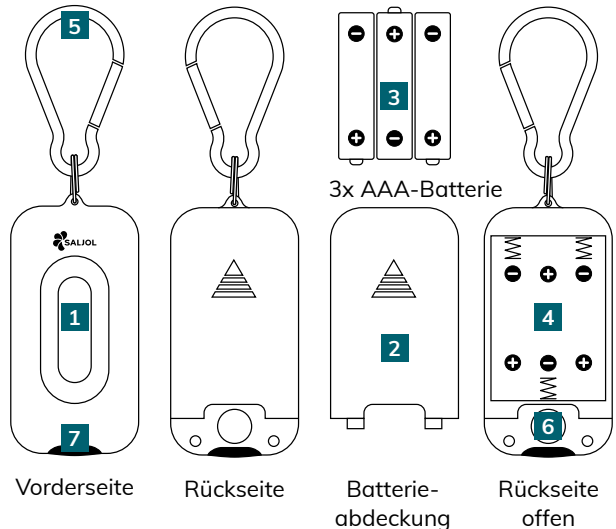

Technische Daten

Maße	75 x 36 x 15 mm
Lebensdauer der Batterie	ca. 20 Stunden
Helligkeit	120 lm
Gewicht mit Batterien	51 g
Gewicht ohne Batterien	23 g

Saljol Rollator LED light

for Saljol Carbon Rollator and Allround Rollator

Instruction manual

EN

Manufacturer: Saljol GmbH
Frauenstraße 32
D-82216 Maisach
Phone: +49 (0)8141 317740
Fax: +49 (0)8141 3177411
Mail: hallo@saljol.de
Web: www.saljol.de/en

Scope of delivery
1x LED light
3x AAA battery

Product overview
1 LED light
2 Battery cover
3 AAA battery
4 Battery case
5 Snap hook
6 Magnet
7 On/off switch




Article number: 4058789013090

Commissioning

Carefully remove the battery cover (2) on the back of the LED light in the direction of the arrow. Insert three AAA batteries (3) into the battery case (4), make sure that the polarity is correct. Close the battery cover (2) again, making sure that it is secure and tight.

The LED light can be attached to the loops of Saljol rollator bags at the front or back by using the snap hook (5).

Use the on/off switch (7) to turn the LED light on and off.

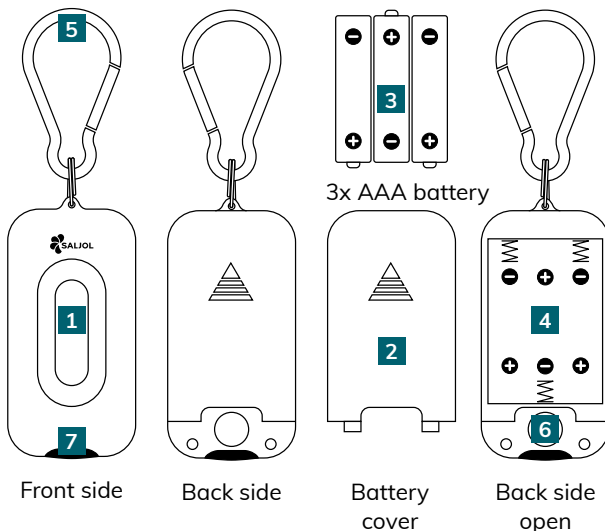

Front side

Back side

Battery cover

Back side open

Technical data

Size	75 x 36 x 15 mm
Battery life	approx. 20 hours
Brightness	120 lm
Weight with batteries	51 g
Weight without batteries	23 g

Information correct at time of printing. Technical specifications are subject to change without notice. Technical drawings and photos may differ from reality. ©2023 Saljol GmbH: all rights reserved. Reprints, including excerpts, are only permitted with the permission of Saljol GmbH.